



COMPATIBILE



Inclinazione con compensazione




Basculamento a baricentro costante



Una grande famiglia con il nuovo schienale Flex3 e nuovi colori telaio

Nel corso degli anni le carrozzine posturali/passive *Invacare*® Rea sono diventate una grande famiglia. La comprovata esperienza Svedese nel ricercare soluzioni posturali personalizzabili ha infatti portato a progettare e realizzare diversi modelli adattabili alle personali esigenze cliniche e posturali dei pazienti. Tutte le versioni hanno come denominatore comune il sistema DSS (**Dual Stability System**®): reclinazione dello schienale con compensazione in lunghezza del tronco e basculamento della seduta a baricentro costante. Questo sistema garantisce una riduzione delle forze di frizione sul tronco, una migliore distribuzione delle pressioni del corpo e una maggiore sicurezza del paziente quando basculato e reclinato al massimo.



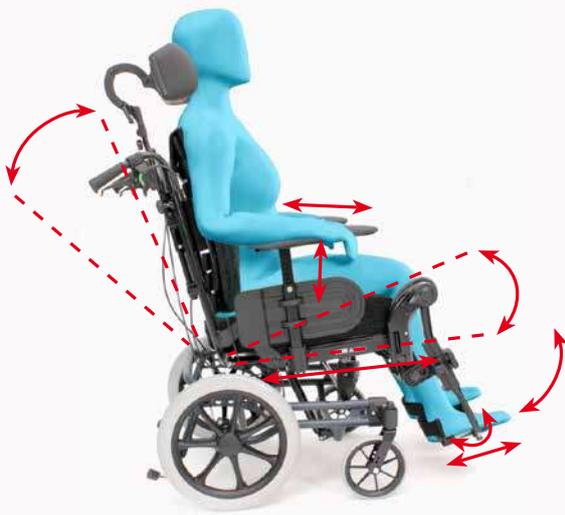

Alle già affermate funzionalità che caratterizzano *Rea Azalea* e *Rea Azalea Assist*, si aggiunge ora il nuovo schienale Flex3, che rende queste carrozzine posturali ancora più adattabili alla fisicità dell'utente. Lo schienale Flex3 sia nella versione con scocca rigida che tensionabile è regolabile in larghezza (in maniera indipendente rispetto alla seduta), in altezza, allargato in maniera asimmetrica o ruotato (solo tensionabile) per creare maggior spazio a livello sacrale o scapolare. Flex3 permette di applicare sistemi di postura per il tronco anche complessi grazie ai tubi tondi dello schienale.

Rea Azalea e *Rea Azalea Assist* sono particolarmente indicate per gestire pazienti geriatrici o affetti da disturbi reumatologici o neurologici grazie alle regolazioni del telaio (larghezza, profondità), dei portapedane, dei poggiatesta e possibilità di scelta tra diversi cuscini, pelotte toracali, poggianuca/poggiatesta e svariati accessori/optional posturali.

Rea Azalea family: una risposta a tante esigenze posturali.

Indicazione sul tipo di schienale e su come deve essere regolata la seduta in base alla fisicità del paziente.

Scocca (Tensionabile)	Scocca (Tensionabile)	Scocca Tensionabile	Scocca (Tensionabile)	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	Tensionabile	Tensionabile	(Scocca) Tensionabile
Statura bassa	Statura alta	Corporatura normale	Fianchi larghi	Torace largo	Bacino largo	Addome ipertrofico	Glutei ipertrofici	Cifotico	Schiena ad S
Seduta più chiusa possibile	Schienale alzato, seduta allungata	Schienale e sedile in posizione normale	Schienale e seduta allargati	Parte superiore dello schienale allargata, seduta ristretta	Parte inferiore dello schienale e della seduta allargati	Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio scapolare	Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio a livello sacrale	Zona dorsale allargata, maggiore avvolgenza sulla zona pelvica	Zona pelvica più contenuta, altre zone adattate alla forma ad S

Tipo di schienale



Flex3: schienale tensionabile
Regolabile in altezza, larghezza in maniera simmetrica e non. Possibilità di ruotarlo di 180° e di angolare singolarmente i tubi.



Schienale tensionabile, regolazioni
Massima libertà di orientare in maniera indipendente i tubi dello schienale per seguire la forma del tronco.



Flex3: schienale con scocca rigida
Regolazione in continuo dell'altezza. Regolabile in larghezza in maniera simmetrica e non.



Flex3 al completo
Ampia scelta di soluzioni posturali per lo schienale tra cuscini e poggianuca/poggiatesta e pelotte toracali.



Flex3: sempre più flessibile !

La ricerca di una migliore postura e di personalizzare la seduta sono aspetti fondamentali per persone adulte/anziane che trascorrono un tempo prolungato in posizione seduta o per pazienti con deficit neuromuscolari o neurologici. La risposta *Rea* si chiama Flex3: uno schienale semplice, comodo, efficace con svariati opzioni/accessori posturali e che può accogliere anche sistemi posturali su misura.

Basculamento e reclinazione

Rea Azalea e *Rea Azalea Assist* possono basculare la seduta fino a 25° e reclinare lo schienale fino a 30°. Entrambi i movimenti sono indipendenti e la loro combinazione permette di raggiungere i 55° così da scaricare meglio le pressioni sul tronco e offrire una posizione più comoda al paziente. Opzione: movimenti elettrici, anziché pneumatici, gestiti tramite pulsantiera.

Caratteristiche e opzioni



Rea Azalea
Autospinta, indicata per chi ha una ridotta capacità motoria ed una residua tonicità muscolare per l'autospinta.



Rea Azalea Assist
Da transito, specifica per chi necessita dell'aiuto da parte all'accompagnatore nella spinta.



Regolazioni elettriche (optional)
Basculamento seduta e reclinazione schienale elettrici comandati da pulsantiera.

Per la gamma completa di accessori previsti su *Rea Azalea* consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

Dati tecnici

Rea Azalea & Azalea Assist	390/440/490 mm + 50 mm + 50/100 mm (Azalea Assist)	430 - 500 mm	400/450 mm (450 mm)	Scocca: 560-790 mm Tensionabile: 540-715 mm	Regolabile L seduta L + 50 mm L + 100 mm	240 - 360 mm	330 - 440 mm
Rea Azalea & Azalea Assist	Fisso 90°/80° Reg.le 0° - 80°	da +1° a 25° (da -1° a 23°)	0°-30°	L + 230 mm L + 220 mm	950 - 1020 mm pedane abbassate	34 kg (con L 440 mm)	Max 135 kg
	Rea Azalea e Rea Azalea Assist soddisfano i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.						
Rea Azalea & Azalea Assist	Crash-tested ISO 7176-19						
Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 +/.036 + /.103 + /.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi							
Nr. Repertorio DM: 87798/R (Azalea, Azalea Assist, Azalea Tall)							


CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Colori telaio



Tipo/Colore fodera

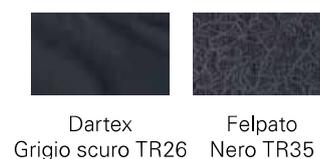



Caratteristiche e opzioni

Rea Azalea Minor

Modello ad autospinta o da transito dalle dimensioni ridotte e con una larghezza seduta da 340 mm (allargabile a 390 mm o 440 mm tramite spostamento dei braccioli). Ideale per gestire adulti con corporatura minuta, bambini o adolescenti con patologie neurologiche dell'età evolutiva che trascorrono molto tempo in posizione seduta e che hanno bisogno di poter variare la postura del tronco.

Piccola e personalizzabile

Il telaio è più corto di 30 mm e seduta meno profonda di 50 mm rispetto alla versione normale. Stesse funzionalità e regolazioni della "sorella" maggiore. Dotata del sistema D.S.T. e dello schienale Flex2 a scelta tra scocca rigida o tensionabile (novità), grande personalizzazione della seduta tramite vari accessori/aggiuntivi posturali.



Rea Azalea Minor
Esempio di configurazione con poggianuca e vassoio ribaltabile.



Schienale tensionabile Flex2
Alternativo alla scocca rigida. Indicata per pazienti con cifosi o gibbosità da compensare.



Nuovi colori del telaio
Blu ottanio, sabbia, verde elettrico (in foto) e rosso.

Per la gamma completa di accessori previsti su **Rea Azalea Minor** consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

Dati tecnici

Rea Azalea Minor	340 mm + 50/100 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 440 mm	Fisso 80°/90° Reg.le 0° - 80°
Rea Azalea Minor	da +1° a 25° (da -1° a 23°)	0°-30°	L + 230 mm L + 220 mm	900 - 970 mm pedane abbassate	32 kg	Max 75 kg	Peso x trasporto: 14,5 kg

Rea Azalea Minor
Crash-tested ISO 7176-19

Rea Azalea Minor soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 +/.036 + /.103 + /.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: **87749/R** (Azalea Minor)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Colori telaio



Tipo/Colore fodera





Rea **Azalea Tall**

Caratterizzata da un telaio allungato di 50 mm e da una seduta più alta e più profonda di 50 mm, **Rea Azalea Tall** è indicata per gestire persone di statura elevata. Stesse funzionalità, regolazioni e piena compatibilità con accessori e optional di **Rea Azalea**. Disponibile sia nella versione ad autospinta che da transito.

Grande gestione del tronco

Anche **Rea Azalea Tall** monta il nuovo schienale Flex3, quindi massima versatilità nella gestione posturale del tronco con la possibilità di montare anche sistemi complessi e su misura grazie ai tubi tondi dello schienale. Basculamento seduta fino al 25° e reclinazione schienale fino a 30° gestite da pistoni pneumatici o da motori elettrici (optional).

Caratteristiche e opzioni



Rea Azalea Tall (transito)

Esempio di configurazione con schienale tensionabile e poggiatesta.



Rea Azalea Tall (autospinta)



Pedane elevabili

Con compensazione in lunghezza e poggipiedi articolati (flesso estensione e profondità).

Per la gamma completa di accessori previsti su **Rea Azalea Tall** consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

Dati tecnici

Rea Azalea Tall	390/440/490 mm + 50 mm + 50/100 mm (da transito)	480 - 550 mm	500 mm	Scocca rigida: 560 - 790 mm Tensionabile: 540 - 715 mm	Regolabile L seduta L + 50 mm L + 100 mm	240 - 360 mm	330 - 490 mm
Rea Azalea Tall	Fisso 90°/80° Reg.le 0° - 80°	da +1° a 25° (da -1° a 23°)	0°-30°	L + 230 mm L + 220 mm	950 - 1070 mm pedane abbassate	34 kg (con L 440 mm)	Max 135 kg
	Rea Azalea Tall soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.						
Rea Azalea Tall	Crash-tested ISO 7176-19						
Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 + /036 + /103 + /133 + /136 + /169 + codici ISO aggiuntivi							
Nr. Repertorio DM: 87798/R (Azalea, Azalea Assist, Azalea Tall)							


CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Colori telaio



Tipo/Colore fodera

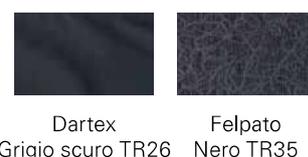



Rea Azalea Max

Telaio rinforzato con portata fino a 180 kg, seduta da 550 mm o 610 mm allargabile tramite spostamento dei braccioli di + 50 mm o + 100 mm. Seduta regolabile in profondità, portapedane allargabili, elevabili con compensazione in lunghezza, sistema D.S.T. per ottenere il migliore assetto posturale nel caso di pazienti bariatrici.

Fino a 180 kg di portata

Schienale tensionabile Flex2 per gestire gibbosità o problematiche posturali del tronco. Ruotabile di 180° per dare più spazio alla zona sacrale (glutei ipertrofici) o alla parte dorsale. Poggiatesta unico convertibile a separato, poggiatesta maggiorati ed articolati, braccioli rinforzati. Disponibile sia nella versione ad autopinta che da transito.

Caratteristiche e opzioni



Rea Azalea Max



Schienale reversibile Flex2

Può essere montato in modo da creare maggior spazio a livello sacrale o dorsale.



Poggiatesta convertibile e poggiatesta articolati

La parte centrale del poggiatesta può essere rimossa. I poggiatesta sono multiregolabili.

Dati tecnici

Azalea Max	550/610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	600 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 440 mm	Reg.le 0° - 80°
Max Assist	550/610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	600 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 440 mm	Reg.le 0° - 80°
Azalea Max	1° - 20°	0°-30°	L + 250 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	33 kg	max. 180 kg
Max Assist	1° - 20°	0°-30°	L + 220 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	37 kg	max. 180 kg

Rea Azalea Max soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 + /.033 + /.103 + /.133 + /.136 + /.169 + codici ISO aggiuntivi

Nr. Repertorio DM: **301697/R** (Azalea Max)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Colori telaio



Tipo/Colore fodera

