

Mygo Stander

Stabilizzatore per bambini e ragazzi



colori imbottiture



LECKEY®

Art. no. 414C88=10000_K

Il Mygo Stander consente ai bambini a partire dai 4 anni di età che richiedono un sostegno importante, di assumere una naturale posizione eretta, in rapporto al peso corporeo. Grazie alla combinazione della pedana estraibile e del supporto ginocchia, è possibile alloggiare in maniera corretta anche bambini che abbiano contratture muscolari importanti.

Cosa lo rende speciale

- Offre la possibilità di alloggiare bambini con importanti contratture agli ischio crurali che non consentono l'estensione del ginocchio.
- Anche il bambino in queste condizioni particolari può essere alloggiato e sostenuto in maniera clinicamente appropriata.
- Può essere utilizzato per bambini con esigenze diverse grazie ai riferimenti numerati presenti sul telaio.
- Sono disponibili diverse versioni di cinture per il fissaggio del bacino.




Quando e dove utilizzarlo

- in ogni momento sia necessaria la posizione eretta
- A casa, durante le attività terapeutiche, negli asili e nelle scuole




► Posizione supina

Esempio di postura eretta scorretta con stiramento eccessivo della muscolatura posteriore retratta

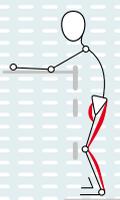

Alloggiamento su Mygo Stander in posizione prona (sx) e supina (dx) che consente il rispetto del contratture

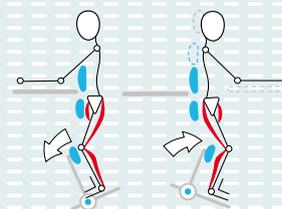

► Assetto posturale



► Stazione eretta (regolazione dell'inclinazione tramite manovella)

Modello Standard

- 2 misure
- Colori: arancione, blu, rosa
- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili
- Angolo di verticalizzazione regolabile continuo da 90° a 170°
- Regolazione in altezza supporto del bacino
- Regolazione separata in inclinazione ed in altezza supporti ginocchia
- Regolazione angolazione pedane con superficie anti-sdrucchiolo

Opzioni

- Unità posturale per il capo
- Supporto spalle
- Pelotte laterali per il tronco fisse e flip away
- Supporti ginocchio cintura tronco e bacino
- Supporto bacino posteriore con elementi laterali e divaricatore
- Diversi tipi di tavolo
- Prolunghe per supporti ginocchia
- Sandali

Dati tecnici	Mis 1	Mis 2
Età	4–10 anni	8–14 anni
Altezza bambino	108–145 cm	135–175 cm
Peso massimo bambino	50 kg	60 kg
Altezza al torace	76–108 cm	98–130 cm
Larghezza torace	16–28 cm	20–32 cm
Altezza supporto bacino	46–73 cm	62–87,5 cm
Larghezza bacino	22–33 cm	28–39 cm
Angolo di massima flessione ginocchia	25°	25°
Angolo pedana		
Flessione Plantare	10°	10°
Flessione Dorsale	10°	10°
Regolazione angolazione tavolo:		
Posizione prona	45°	45°
Posizione supina	45°	45°
Altezza tavolino	0–15 cm	0–15 cm
Regolazione angolo di inclinazione:		
Posizione prona	0° a 80°	0° a 80°
Posizione supina	0° a 80°	0° a 80°
Ingombro totale		
Lunghezza	98 cm	113 cm
Larghezza	63 cm	65 cm
Peso	22 kg	25 kg


Opzioni



• Unità posturale per il capo




• Supporto spalle in PU, misura unica

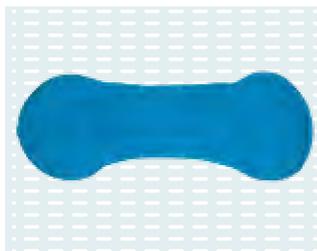

• Imbottitura supporto spalle, misura unica



• Pelotte laterali per il tronco fisse, misura unica

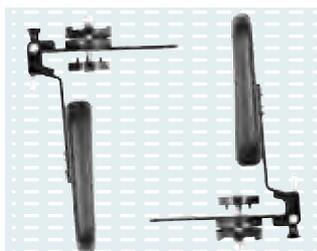

• Pelotte laterali per il tronco swing away - misura unica



• Pelotta laterale per il tronco complex swing away



• Supporti laterali per il bacino (coppia)



• Pelotta frontale



◦ Cintura pelvica per rotazione bacino prona



◦ Cintura pelvica per rotazione bacino supina



◦ Supporti ginocchia standard



◦ Supporti ginocchia split (separati) regolabili



◦ Supporto bacino posteriore con elementi laterali e divaricatore



◦ Imbottitura per divaricatore



◦ Imbottitura per supporto posteriore



◦ Supporto bacino posteriore e divaricatore completo



◦ Tavolino



◦ Tavolino con vaschetta



◦ Tavolino con inserto trasparente



◦ Struttura gioco per tavolino



◦ Prolunghe per supporti ginocchia



◦ Sandali